



NDI Passive Spheres™



ES

Para usar como accesorio en la asistencia del registro automático y localización durante la terapia asistida por ordenador.

No reesterilice. La reesterilización puede no ser efectiva y puede afectar la precisión.

No utilice si el paquete estéril está dañado.

1. Coloque la esfera en la vara de soporte y apriete hacia abajo hasta que encaje en su lugar. (A)
2. Si la superficie reflectora se daña o se ocluye con materias extrañas, reemplace la esfera antes de usarla.
3. No reemplace la esfera mientras la herramienta se encuentre dentro del cuerpo del paciente.
4. Para retirar la esfera, sosténgala cerca de la base y tire hacia arriba. (B)

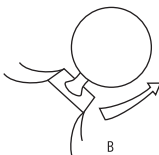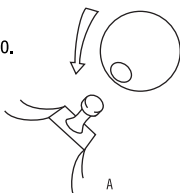

ATENCIÓN: Las leyes federales de EE.UU. restringen este dispositivo indicando que la venta del mismo sólo puede ser realizada por un médico o por órdenes del mismo.



Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO



CE
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00