



NDI Passive Spheres™




コンピュータ支援治療の際の自動登録およびローカリゼーションを補助する為の付属品として使用。

再滅菌しないでください。

再滅菌は効果が無く、計測精度に悪影響を及ぼす可能性があります。

滅菌梱包に損傷があれば使用しないでください。

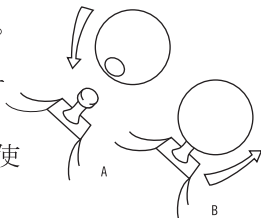

1. スフェアをマウントポストに置いて、パチンとはまるまで押し付けます。(A)
2. 反射面に傷がついたり、異物によって隙間ができた場合、使用せずにスフェアを交換してください。
3. ツールが患者の体内にある状態でスフェアを交換しないでください。
4. スフェアは、ベース部をつかみ、引き上げて取り外してください。(B)



Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO



CE
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00