



NDI Passive Spheres™





Avsett som tillbehör för att underlätta autoregistrering och lokalisering i samband med datorassisterad behandling.

Får ej omsteriliseras. Omsterilisering kanske inte får avsedd effekt och kan påverka noggrannheten.

Får ej användas om den sterila förpackningen är skadad.

1. Placera kulan på monteringsstiftet och tryck ned tills det snäpper. (A)
2. Om den reflekterande ytan skadas eller ockluderas av främmande ämne bör kulan bytas före användningen.
3. Byt inte kulan medan instrumentet befinner sig i patientens kropp.
4. Avlägsna kulan genom att fatta tag nära foten och dra uppåt. (B)

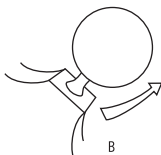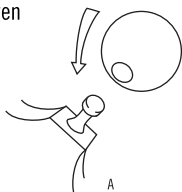

Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO



CE
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00