



NDI Passive Spheres™


PT

Para utilização como acessório para auxiliar no auto-registo e na localização durante a terapia assistida por computador.

Não voltar a esterilizar. A re-esterilização pode não ser eficaz e pode afetar a precisão.

Não utilizar se a embalagem estéril estiver danificada.

1. Colocar a esfera no pilar de montagem e pressionar para baixo até ocorrer um estalido. (A)
2. Se a superfície refletora ficar danificada ou obstruída com matéria estranha, substituir a esfera antes da utilização.
3. Não substituir a esfera enquanto o dispositivo está no corpo do doente.
4. Para retirar a esfera, agarrar junto à base e puxar para cima. (B)

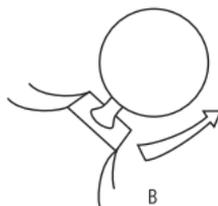

Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO



CE
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE



NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00

GD10121 007