



NDI Passive Spheres™





Da utilizzare come supporto alla registrazione automatica e alla localizzazione durante la terapia assistita dal computer.

Non risterilizzare. La risterilizzazione potrebbe non essere efficace e potrebbe comprometterne la precisione.

Non utilizzare se la confezione sterile è danneggiata.

1. Porre la sfera sul sostegno di montaggio e premere fino a quando si aggancia in posizione. (A)
2. Se la superficie riflettente è danneggiata oppure ostruita da materiale estraneo, sostituire la sfera prima dell'utilizzo.
3. Non sostituire la sfera mentre lo strumento è a contatto del corpo del paziente.
4. Per rimuoverla, afferrare la sfera per la base e tirare verso l'alto. (B)

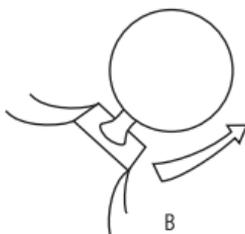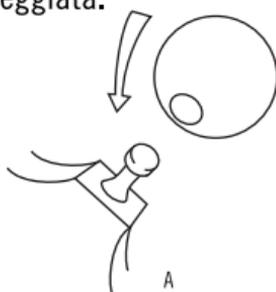

Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO



CE
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00